

CURAPROX 歯科医院用 患者様説明下敷きセット

①歯ブラシ 説明導入

表




歯科医院
推奨
RECOMMEND
★★★

理想的な歯みがきをサポートする歯ブラシ 「クラブロックス」のご紹介

歯科医院がおすすめする理由 ～クラブロックスが目指した歯ブラシの理想～

！リスク部位をみがくにはどうすればいいか。

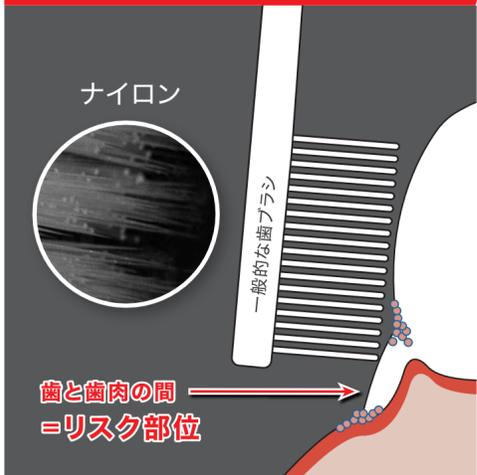

ナイロン
一般的な歯ブラシ

歯と歯肉の間
=リスク部位

ナイロン
硬い歯ブラシや、強すぎる力で歯ぐきをみがくと、歯ぐきを傷つけ歯ぐきが下がる原因になってしまいます。

その問題を解決するために開発したのが、歯みがきに最適なブラシ毛**クーレン®繊維**です。



クーレン®繊維
CURAPROX

クーレン®繊維はやわらかく弾力性があるため、歯と歯ぐきの境目にフィットし、プラークにしっかりアプローチできます。



クーレン®繊維

- ✓ 歯・歯ぐきにやさしく
- ✓ 歯と歯ぐきの境目までみがける
- ✓ 一般的な歯ブラシの半分程度の力でOK



スイスのプロフェッショナル オーラルケアブランド

CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

大切な歯に正しい知識と道具を。

CURAPROX(クラブロックス)は、口腔ケアの意識が高いスイスにおいて、人々が生涯を通じて、健康的な歯を保てることを目的とした予防歯科の考えのもと、大学教授、歯科医師、歯科衛生士、そして世界中の口腔ケアのスペシャリストの協力により、口腔ケアにおける確かな効果と喜びを受けられる製品として開発されました。

裏

クラブロックスの基準

～歯ブラシの理想を追求し開発した「クーレン®繊維」を全ての歯ブラシに採用～

ナイロンとクーレン®繊維の比較表

	一般的な歯ブラシ	CURAPROX
ブラシ	ナイロン	クーレン® 繊維
毛の太さ	0.1～0.2mm	0.08～0.1mm ^{※1}
植毛数と植毛方法	密度のない碁盤目状の植毛はみがいても隙間ができてしまう 約700-1,200本 プラークを残してしまう	高密度かつ、蜂の巣状の植毛により隙間なくみがける 5,460-12,460本 プラークをしっかり除去
耐久性	約1ヶ月	約3ヶ月 ^{※2}
速乾性	-	水を含みにくく乾きやすい
毛質	固い 普通 やわらかい	やわらかく弾力性がある

「クーレン®繊維」が実現するオーラルケア

プラーク除去 × ガムケア(歯ぐきケア)



クーレン®繊維 ▶
「クーレン®繊維」は、プラークの除去はもちろん、毛先がラウンド加工されているため、歯肉も優しくケアできます。

全て毛先がラウンド加工



電子顕微鏡写真
CS 5460

※1 CS 5460, CS スマート, CS12460 ヘルベットの場合同様 ※2 使用方法や個人差で変わります。 注) 上記比較は毎日新聞記事「疑問氷解」から数字抜粋

クラブロックスは、家庭でのセルフケアを大切にしたい人のための最高品質のブラシを使った、とびきりカラフルでやさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。

CURAPROX

better health for you

SWISS PREMIUM ORAL CARE

CURAPROX 歯科医院用 患者様説明下敷きセット

②歯ブラシ 選び方ガイド

表

CURAPROX ALL STAGES OF LIFE 年齢別歯ブラシセレクトガイド

健康な歯は一生の宝物。歯ブラシは健康を保つ一生の道具。


クラブロックスは、生涯を通して健康な歯を保てることを目的に、子供から大人まですべてのステージで、オーラルケアにおける確かな効果と喜びを感じられる製品をラインナップしました。

対象年齢	0 to 4 (0歳-4歳)	4 to 12 (4歳-12歳)	10 and over (10歳以上)	15 and over (15歳以上)	PREMIUM (プレミアム)
特徴/カラー	<p>健やかな成長を願って</p> <p>ベビー</p> <p>カマかせのブラッシングを防ぎ、ベビーのとっても敏感なお口や歯肉を傷つけずにしっかりみがける歯ブラシです。</p>	<p>大好きなカラーで正しい歯みがき!</p> <p>CS キッズ</p> <p>上手に持てる、やさしくみがける、たのしく身に付く歯みがき習慣! キッズの小さなお口でも奥まで届くコンパクトブラシヘッド!</p>	<p>豆種のみが心地よい仕上げみがきにも</p> <p>CS スマート</p> <p>コンパクトなヘッドに7600本のブラシ毛! 高密度植毛によって効率的にみがけます。</p>	<p>クラブロックスの定番!</p> <p>CS 5460</p> <p>5460本のブラシ毛! 使いやすい大人サイズの歯ブラシ。世界中の人々に定番の歯ブラシとしてご愛用いただいています!</p>	<p>クラブロックス史上最高傑作!</p> <p>CS 12460ベルベット</p> <p>12460本のブラシ毛! ベルベットが求めたものはブレードをしっかりと落とすことと歯肉への肌触り</p>
毛の植立本数	4,260本	5,500本	7,600本	5,460本	12,460本
毛先の直径	0.09mm	0.09mm	0.08mm	0.1mm	0.08mm
毛の長さ	6.5mm	7.5mm	8mm	9mm	9mm
柄の長さ	149mm	163mm	163mm	180mm	180mm
ヘッドのサイズ	18x9.2mm	20x10mm	20x10mm	25x12mm	25x12mm

クラブロックス歯ブラシの交換時期

一般的な歯ブラシの交換時期は1ヶ月程度。対して、「クーレン®繊維」を使用したクラブロックスの歯ブラシは、水分を含みにくく丈夫で長持ち。毛先が開いてきたら歯ブラシを交換しましょう。

3ヶ月より早く毛先が開いてしまう方は、ブラッシングの力が強すぎる可能性があります。鉛筆を軽く持つくらいの力加減でみがきましょう!

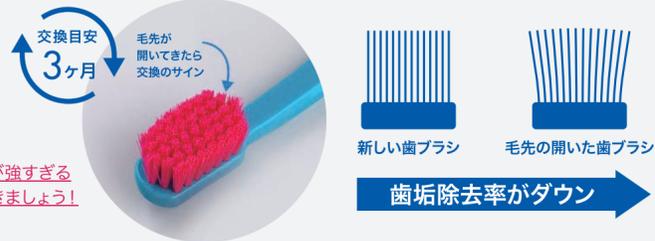

使い終わった歯ブラシはリサイクル

ご使用済みのクラブロックス歯ブラシを洗浄してお持ちください。

cura/cycle




裏

CURAPROX TOOTHBRUSH TYPE 歯ブラシセレクトガイド

自分にあった歯ブラシを選んでますか?

クラブロックスは、お好みのみが心地やお口の大きさに選べるさまざまな製品をラインナップしました。今までのどんな歯ブラシとも違う、クラブロックスだけのみが心地をご体感ください。

クラブロックス 硬さ&ヘッドサイズチャート

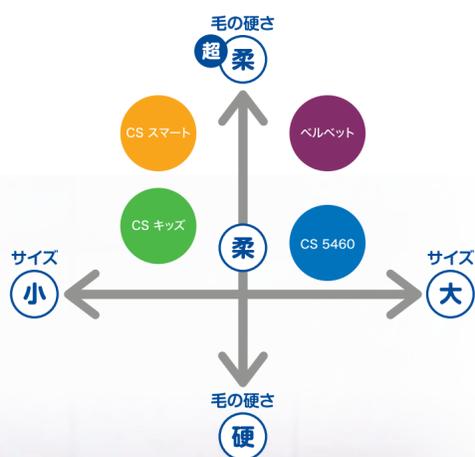

商品名/特徴	ヘッドタイプ/毛	サイズ
<p>CS 5460</p> <p>定番のオールラウンド製品</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すべての方 ●最初にお試しいただくベーシックタイプ 	<p>スタンダードヘッド</p> <p>毛直径: 0.1mm 毛長さ: 9.0mm 毛本数: 5,460本</p>	<p>原寸大</p> <p>CURAPROX ultra soft + 5460</p> <p>長さ 180mm</p>
<p>ベルベット</p> <p>クラブロックス史上最高傑作</p> <ul style="list-style-type: none"> ●5460を使いこなせる方 ●さらなる柔らかさをお求めの方 	<p>毛直径: 0.08mm 毛長さ: 9.0mm 毛本数: 12,460本</p>	<p>CURAPROX velvet + 12460</p> <p>長さ 180mm</p>
<p>CS キッズ</p> <p>身に付く楽しい正しい歯みがき</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ヘッドが小さいのでお口の開けにくい方 ●キッズ用 	<p>コンパクトヘッド</p> <p>毛直径: 0.09mm 毛長さ: 7.5mm 毛本数: 5,500本</p>	<p>CURAPROX ultra soft + kids</p> <p>長さ 163mm</p>
<p>CS スマート</p> <p>小さめヘッドにぎっしり7600本</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キッズの仕上げ磨き ●1本1本丁寧に磨きたい方 	<p>毛直径: 0.08mm 毛長さ: 8.0mm 毛本数: 7,600本</p>	<p>CURAPROX ultra soft + smart</p> <p>長さ 163mm</p>



表

歯科医院用

赤ちゃんの 健やかな成長と共に

スイスのプレミアムオーラルケアブランド
クラブロックスベビー

CURAPROX
baby

対象年齢
0-24
ヶ月

A HEALTHY
smile
FOR YOUR CHILD

BIO-functional



SWISS PREMIUM ORAL CARE

ナディア・マリア・ケラホフ医師

「クラブロックスベビーの歯がためは、
本当に万能です。
歯の萌出時の痛みを和らげ、
感覚と運動の発達を促します!」




Q 赤ちゃんには歯がためが必要？
良い歯がためはどう見分けたい？

クラブロックスベビーの歯がためには、**赤ちゃんの感覚や運動能力の発達をサポートする工夫があります。**振ると音が出るガラガラや、舌の表面を刺激する表面構造。赤ちゃんは物を口に入れることで物の形や性質を学習するため、様々な感覚刺激を受けることは、脳の発達のためにも大切なことなのです。

クラブロックスベビーの歯がために組み込まれたトレーニング用歯ブラシは、まもなく始まる歯みがきの準備になります。乳幼児期からの歯みがき習慣。これが、乳歯を健康に保つ最善の方法となるのです。

※ ナディア・マリア・ケラホフ医師の見解です

Tip 歯が生えてきたら歯科医院を受診するタイミング

むし歯や歯列不正を早期に見極められるよう、生後30か月(約2歳6か月)までには歯科検診を受けましょう

裏

CURAPROX
baby

お子さまの健やかな成長のために

乳幼児期からの適切な口腔ケアは、健やかな成長を促し、心身の健康を維持するためにも非常に大切です。健康な歯は一生の宝物。早くからの正しいケア、毎日のケアを心がけましょう。

0 to 4 (0歳-4歳)

+仕上げみがき

コンパクトなヘッドは仕上げみがきに最適!

CS スマート



0-24 month (0~24か月)

口腔ケアの第一歩

クラブロックスベビー 歯がため

はじめての歯が歯ぐきから出てこようとしている時、赤ちゃんの口の中は特に敏感になっているため、むずかっしまう赤ちゃんもいます。歯がためは、そんな状態をやわらげ「歯みがきの準備」を進められるように設計されています。



Jolly rattle
カラフルなガラガラが好奇心を刺激します



Exciting surface
リングの右と左で違う形状の取っ手が触って楽しい



Training toothbrush
先は歯ブラシの形状になっています。生え始めの赤ちゃんの歯みがきトレーニングの第一歩に

歯がためを冷蔵庫で保管して下さい。
冷たい歯がための感触を喜ぶ赤ちゃんはたくさんいます。

初めての歯みがき、もう泣かせない!

クラブロックスベビー 歯ブラシ

かゆがったり、痛がったり、お子さまが歯みがき嫌いになっていませんか? クラブロックスベビーの歯ブラシは力まかせのブラッシングを防ぎ、ベビーの敏感なお口や歯肉を傷つけずに、しっかりみがける歯ブラシです。

クラブロックスベビーの歯ブラシの特徴

- 極細のブラシ毛は歯に優しく、歯ぐきを傷つけません。そして4,260本の毛が徹底的に歯の清掃を行います
- コンパクトでラバーコーティングされたブラシヘッドはお口のすみずみまで届きやすく口内に優しくアプローチ
- 自然な力で正しくブラシが持てるように歯や歯肉に圧力がかかりすぎない作りのグリップ
- カラフルなこの歯ブラシなら毎日の歯みがきをもっと楽しくなるはず



④キッズ

表

歯科医院用

うちの子は大丈夫？パパママに知って欲しい
「6歳臼歯」を
 むし歯から守るために

スイスのプレミアムオーラルケアブランド
 クラプロックス キッズ

CURAPROX Kids

対象年齢
4-12
 歳

「6歳臼歯」とは
 5~6歳ごろ、永久歯の中で最も早く生えてくる歯で、
 大きさも一番大きく、食べ物噛む力も一番強く、
 将来に渡って歯並びや噛み合わせに影響します。

歯ぐきに覆われていて少しずつ生えてくる
 歯ぐきとの間に汚れが溜まりやすい
 噛み合わせの溝が深いので、汚れが取れにくい
 エナメル質が未熟で、酸に対する抵抗力が弱い

生え始めてから1年以内に
むし歯になるお子さまが多い!!

裏

CURAPROX KIDS DAILY CARE
 キッズのデイリーケア

親子で一緒に楽しく歯みがきを心がけましょう!
 大人でもなかなか上手にはできない歯みがき。子どもも上手に歯みがきができないことを前提に焦らずサポートしましょう! また、お子さまが自分で歯ブラシを選ぶととっても楽しく歯みがきができます!

選べるカラー! はじめて自分で選ぶ歯ブラシ
 クラプロックス キッズ

歯ぐきに覆われた「6歳臼歯」もしっかり優しくケア
 クラプロックスキッズの歯ブラシのブラシ毛は毛先がラウンド加工されているため、「6歳臼歯」の歯肉も優しくケアしながらプラークをしっかり除去します。

5,500本
 独自開発したブラシ毛「クレーン®繊維」を5,500本高密度に植毛! 子どもの歯ぐきを傷つけず歯垢をしっかり取り除きます

4-12歳
 4-12歳を対象に設計された小さなお口でも奥まで届くコンパクトブラシヘッド!

6 colors
 大好きなカラーが毎日の歯みがきを楽しくする! 6つのハッピーなカラーが登場!

8角形
 子どもの小さな手でもフィットするハンドル8角形により自然に上手な持ち方が身に付きます!

全ての毛先がラウンド加工
 電子顕微鏡写真

6歳臼歯

選べる楽しい6つのカラーでバクテリアを退治!
 BRUSH WITH JOY

仕上げみがき歯ブラシ
 CS スマート

きめ細やかな仕上げみがきに最適
 コンパクトなヘッドに7600本のブラシ毛! 高密度植毛によって効率的にみがけます。

楽しく仕上げみがき!

仕上げみがきが大変です。いつまですればいいのでしょうか?

大変ですが、仕上げみがきはとても大切な歯みがきです。仕上げみがきをしなくなるとむし歯が増える傾向があります。大体10歳頃を目安に、歯科医院の定期検診でお子さまの歯みがきを見てもらいましょう! 仕上げみがきをしなくても大丈夫と先生に言われたら卒業です!

表



歯科医院用


歯と歯の間 みがけていますか？

歯と歯の間は、むし歯のリスク部位の中で、
歯ブラシではみがけないため、よりリスクの高い部位です。

むし歯のリスク部位

*歯周病のリスク部位でもあります


奥歯

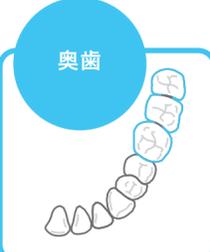

歯と歯の間
(歯間部)



歯と歯ぐきの
境目

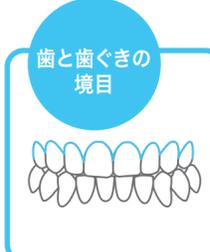

昨日までみがけなかった歯間に。

スイスのプロフェッショナルオーラルケアブランド クラプロックス

CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

裏


CURAPROX

患者さまの歯間ごとに最適なサイズのブラシをご提案！

使い方動画
YouTube



START

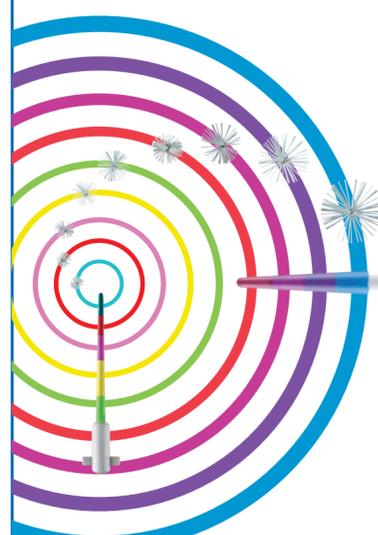

歯間測定

歯間のサイズは人によっても違い、
部位によっても違います。
歯間部のプラークを効果的に
除去するために、まずは歯間の
サイズを測ってみましょう！



歯間部サイズを「専用プローブ」で測定

SELECT

正しいサイズを選定

患者さまの歯間にぴったりのサイズをご用意します。

歯間が狭い 歯間が広い



プライム

一般的な歯間の方用

ペリオ

歯間が広い・補綴物装着の方用

サージカルワイヤー採用


歯間を通るために開発された強度のある高品質ワイヤー。
ニッケルフリーなのでアレルギーの方も安心です。

その隙間、
十人十色。



ジャストフィットだから歯間ケアは 1日1回1ストロークでOK 継続を心がけましょう！

歯間部位に1回通すだけ。

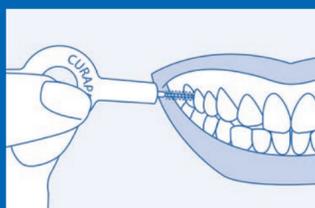

表

歯科医院用

CURAPROX

徹底
ガムケア
宣言

歯ブラシの理想形
あらゆる口腔環境において、
安定した性能を発揮します。*

※センシティブブラシヘッド / シングルブラシヘッド使用時

炎症時

叢生部位

インプラント治療時

矯正治療中

修復補綴領域

HYDROSONIC PRO

ハイドロソニック プロ
歯科専用

Developed by Prof. Ulrich P. Saxer and CURAPROX.
MADE IN SWITZERLAND

裏

HYDROSONIC PRO

ハイドロソニック プロ
歯科専用

詳しい使い方の動画

目指したのは 誰でも歯ブラシの効果を最大限に発揮できること

RUBBER GRIP
ラバーグリップ

人間工学に基づき設計された把持しやすいラバーグリップ。自然な持ち方で、歯磨きに理想的な角度を保ちます。

ベングリップ パームグリップ

スイス生まれのイノベーションが日本に上陸

CHARGING
充電

フル充電 **10時間**

1日 **4分2週間** 使用可*

ON/OFF・MODE
1つのボタンで簡単操作

電源のON/OFF。電源が入っている状態の長押しで、7段階の音波振動モード変更ができます。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
スタート	クリーン		スマイル			
22,000回/分	32,000回/分		42,000回/分			
初めて音波式電動歯ブラシを使う方に	歯肉に炎症がある方に		健康な歯肉の方に			

MECHANICS
流体力学

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯みがき剤が混ざりあったところに乱流が生じます。この乱流により、毛先が届かない場所のデンタルバイオフィルム(細菌)も取り除くことができます。

BRUSH SHAPE
ブラシの形状

歯の幅径に合わせて包み込んで磨けるしずく形。

SMART HEAD
3つのブラシヘッド

あらゆる口腔環境への対応が可能な、3つのブラシヘッド。

パワーブラシヘッド	センシティブブラシヘッド	シングルブラシヘッド
しっかりパワフルな毛質。健康な歯肉の方に	非常に柔らかい毛質。歯肉に炎症がある方に	全てのリスク部位へのアプローチに

クレーン®繊維は歯みがきに適したやわらかさと弾力を備え安定した性能を発揮します。

クラカブ®の人間工学に基づいた角度はみがきにくい部位にも簡単に行き届きます。

*使用環境によって時間は前後します。
*本体LEDが青ではなく赤の場合、バッテリーの充電残量は20%未満です。
*充電状況の確認は、充電器からハイドロソニック プロを取り外した時や、スイッチを切った時に充電状況を確認することができます。

*次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

*歯ブラシの交換目安：約3か月です。毛先が広がった場合はかかりつけの歯科医師・歯科衛生士にご相談下さい。

表

歯科医院用

加齢による口腔環境の変化に
オーラルフレイルを予防するための音波式電動歯ブラシ

ハイドロソニックイージー
HYDROSONIC EASY

50歳
過ぎたら[®]
電動歯ブラシ



CURAPROX
+ SWISS PREMIUM ORAL CARE

オーラルフレイルとは
健康な状態から要介護状態になる
きっかけともなる口腔機能の衰えを
「オーラルフレイル」と呼びます。

✓ チェックリスト

- 半年前と比べて、硬いものが食べにくくなった
- お茶や汁物でむせることがある
- 義歯を入れている
- 口の渇きが気になる
- 半年前と比べて、外出が少なくなった
- たくあんくらいの硬さの食べ物をかむことができる
- 1日に2回以上、歯をみがく
- 1年に1回以上、歯医者に行く

2つ以上当てはまる方は裏面へ →

裏

50歳過ぎたら[®]
電動歯ブラシ
をオススメするウケ

50歳を過ぎた頃からの一般的な衰え

- ホルモンバランスの変化
- 唾液腺の老化による唾液量の減少
- コラーゲンの不足による歯肉の衰え
- 手指感覚の鈍化

⚠ 歯ブラシでのオーラルケアの効果は人によって差が出てきます。

誰でもかんたんに安定した
オーラルケアの効果を得られるのが
電動歯ブラシ

電動歯ブラシでのホームケア

センシティブブラシヘッドの「クーレン[®] 繊維」は加齢による変化した口腔環境、
オーラルフレイルの予防に最適

CUREN[®] 歯と歯ぐきにやさしく効率的なケアを可能にする「クーレン[®] 繊維」を搭載

CURA CURVE[®] みがきにくい場所にもかんたんに行き届く人間工学に基づいた「クラカーブ[®]」

はじめでもOK プレミアムなのにかんたん操作

- 1つのボタンでかんたん操作
- 選べる3つの音波振動レベル
- 軽量なのにこれ1本で基本ケア

毛先の高速振動で強力清掃
流体力学的効果

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯みがき粉が混ざりあつたところに乱流が生じます。この乱流によって、歯と歯の間の隅角部等、毛先の届かないところにいる多くのプラークを取り除きます。

定期的な歯科医院へのメンテナンス訪問

ハイドロソニックイージー
HYDROSONIC EASY




表

歯科医院用

後悔する前に ... 介護になる前に... 今から考えたい、シニア世代の口腔ケアの話



60代以上の男女で自分の体について、若い頃に比べて「変化してほしくなかったこと」「失って後悔したこと」は？

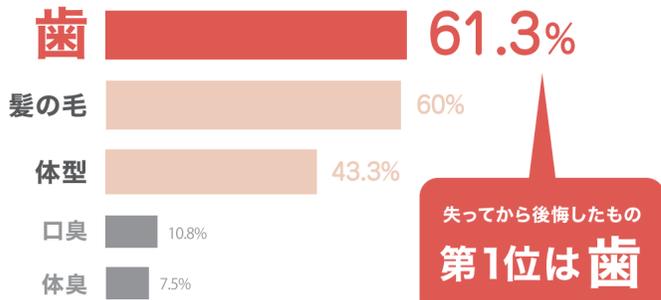

定期的な
歯科医院での
健診が大事!



「歯並びと歯の残存数に関する意識調査」インビザライン・ジャパン(株)調べ


歯が選択された理由として
「食べ物が美味しくなくなった」
「手入れ不足で総入れ歯になってしまった」
「固いものが食べにくくなった」「滑舌が悪くなった」など...
**歯を失うと“食べる”“話す”といった
人生の喜びが失われてしまいます。**

後悔する前に、今まで以上にご自身とご家族の口腔ケアに気を付けてみましょう。

裏

はじめての介護で
電動歯ブラシを使うときの

確認事項 と 歯みがき手順

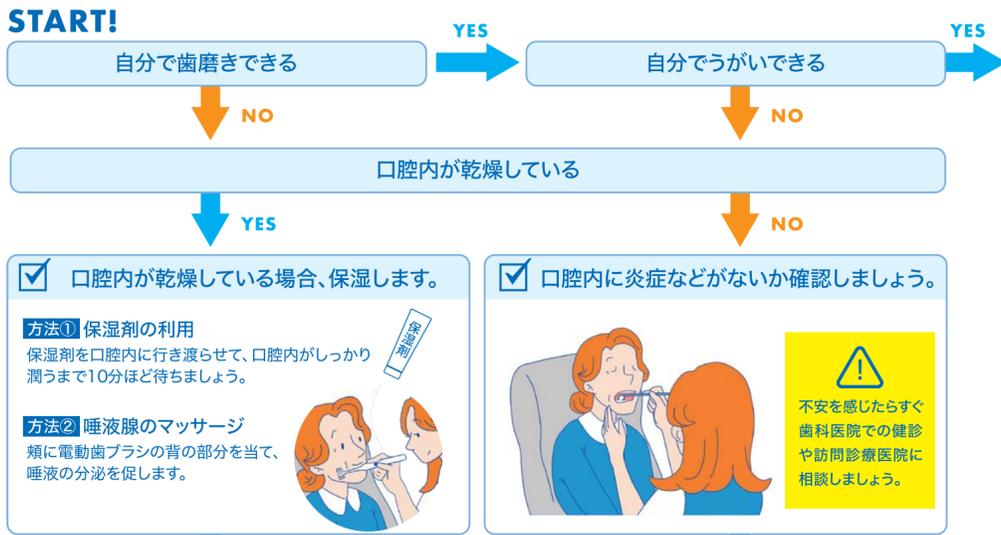


はじめての介護をサポート
大きなブラシヘッドは
高齢者の歯に当てやすく
介護に最適

CURAPROX
+ SWISS PREMIUM ORAL CARE
ハイドロソニックイージー
HYDROSONIC EASY

【オプション(別売)】
CHS200
フレイル替えブラシ



1 電動歯ブラシを水に濡らします。

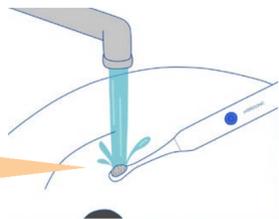

2 口腔内専用ウェットシートを指に巻き付けてから、
電動歯ブラシで口腔内の洗浄をはじめます。



3 ブラシを押し付けずに軽く歯と歯肉を当てていきます。
ゆっくり満遍なくみがき、汚れ(プラーク)を落とします。



4 汚れた唾液をウェットシートで拭きます。その際、必ず奥から
手前へ拭いてください。(誤飲性肺炎予防のため)



→ 大きいブラシに慣れたら小さいブラシに交換し
細かく丁寧に磨けるようにしましょう

自分でできるうちに
電動歯ブラシに
慣れておきましょう

要介護前から
予防するのが
大切です



センシティブブラシ

表



クラブロックス ブラックイズホワイト
CURAPROX BLACK IS WHITE

より効果的なホワイトニングのために

歯科医院での **本格ホワイトニング** の前と後に
はじめようセルフホワイトニング!

本格ホワイトニングの前に、**粉みがき**を使った
プレホワイトニング
「気軽にお試し」

専用の薬剤やLED、ハロゲン光などを使った
本格ホワイトニング

本格ホワイトニングの後に、**粉みがき**と電動歯ブラシで
キープホワイトニング
「継続が大事」

歯本来の白さを取り戻す!

●「プレホワイトニング」「キープホワイトニング」は株式会社クラデンジャパンの登録商標です。

SWISS PREMIUM ORAL CARE

裏

CURAPROX **BLACK IS WHITE** SELF WHITENING
セルフホワイトニングのデイリーケア

まずは気軽に1日1回、2週間からはじめてみましょう!
毎日きちんと歯みがきをしている人でも、歯の着色汚れはなかなか落ちにくいものです。
そこで、気軽に今日からでもはじめられるセルフホワイトニングがオススメです。

SONIC TOOTHBRUSH
音波式電動歯ブラシ
独自開発の黒いブラシで汚れを防ぐ

クラブロックス ブラックイズホワイト 音波式電動歯ブラシ 替ブラシ 2本入り

活性炭粒子を配合したカーボンブラシは、細かい粒子によりエナメル質を傷つけることなく着色汚れを取り除き、美しい歯へ仕上げます。



TOOTHBRUSH
歯ブラシ
「カーボン」ブラシで輝く笑顔に

クラブロックス 歯ブラシ ブラックイズホワイト(黒×白)2本セット
クラブロックス 歯ブラシ ブラックイズホワイト(黒×黒)2本セット



WHITENING POWDER
粉みがき
歯本来の白さを取り戻す!

クラブロックス ブラックイズホワイト (Black is white) 粉みがき 3g/20g

汚れ、黄ばみ、歯石、プラークの沈着を防ぎ、歯本来の白さを取り戻すホワイトニングパウダーです。

- ✓ 発泡剤不使用
- ✓ 歯にやさしい成分!
- ✓ 「カーボン」配合パウダー

2種類のヒドロキシアパタイト(清掃剤)
炭(清掃剤)
サンゴ末(清掃剤) 配合

1/d Once a day 粉みがきは、1日に1回ご使用ください。

